

Правила відбору та відправлення матеріалу

Щоб забезпечити точність дослідження та зберегти якість біоматеріалу під час транспортування, просимо дотримуватися наведених рекомендацій.

Цитологічні дослідження:


При заборі матеріалу на предметне скло:

- Не фарбуйте препарат. Достатньо дати йому повністю висохнути.
- Після висихання помістіть скло в холдер та надійно запакуйте, щоб запобігти його пошкодженню під час транспортування.



Випітні рідини:

- Одразу після відбору помістіть матеріал у пробірку з ЕДТА. Заповнюйте пробірку до позначки, зазначеної виробником.
- У спекотну пору року рекомендуємо додавати до посилки холододовий елемент (холодоагент) для підтримання необхідної температури під час транспортування.

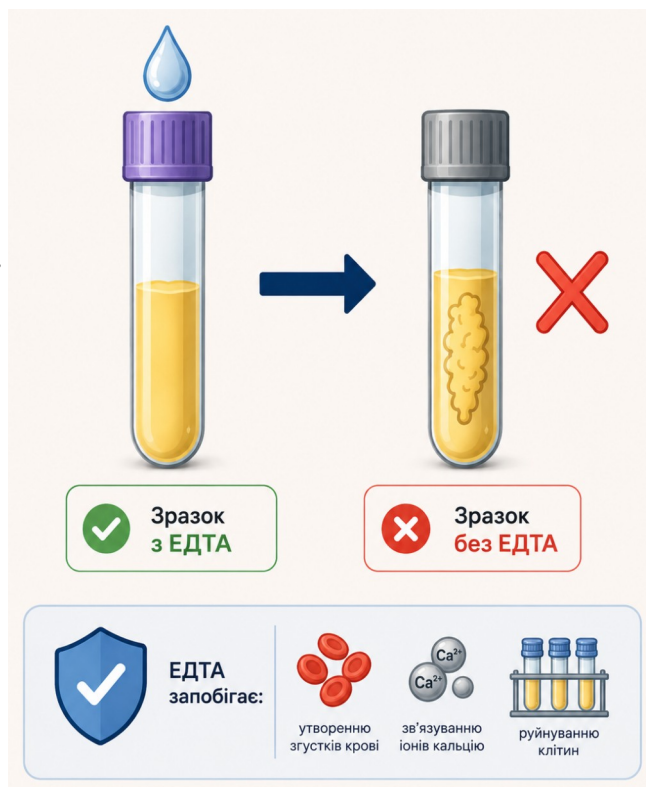

Гістологічні дослідження:

- Після відбору матеріал необхідно якомога швидше занурити в 10% нейтральний формалін або 70% етиловий спирт.
- Ємність із матеріалом повинна бути герметично закрита. Для додаткового захисту обов'язково обмотати її харчовою плівкою в кілька шарів та помістити в ZIP-пакет.
- Під час оформлення відправлення просимо вказувати опис вмісту як «зразки» або «косметика». В іншому випадку перевізник може відмовити у прийнятті посилки.



Дані для відправки:

м. Дніпро

Каляушко Віра

095 220 93 22

Нова пошта, поштомот №45363